
Navodila za uporabo in montažo počivalnika
COCOON, za modele COCOON 1 ali 2 motorja,
COCOON XS in COCOON XXL



generacija 1



generacija 2

7 avenue Bernard Pieds 10110 BAR-SUR-SEINE – FRANCIJA Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12 Splet: www.innov-sa.com –
E-pošta: innovsa@innovsa.com MAJ 12/21 – verzija 5



PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO

Simboli v navodilu za uporabo



Opozorilo

Simbol označuje potencialno nevarno situacijo, v kateri lahko pride do resnih poškodb ali smrti.

1– NAVODILO ZA UPORABO

Pred vsako uporabo in premikom počivalnika preverite, če mehanizem deluje brezhibno (če se je zataknil kakšen predmet, žival ipd.).

Skladiščenje in shranjevanje počivalnika

Počivalnik COCOON je potrebno hraniti v suhem prostoru z zmerno temperaturo, v pokončnem položaju v originalni embalaži.

Pogoji uporabe

Počivalnika ne smete uporabljati:

- če niste opravili izobraževanja in praktičnega testa pri distributerju,
- če niste prebrali in razumeli navodil za uporabo.

Ko je počivalnik v položaju počitka (*Relax position*), mora biti odmaknjen od stene vsaj 80cm.

Pred vsako uporabo preverite mehanizem, ki ne sme biti blokirano. Preverite, če se morda kaj skriva pod počivalnikom (gl. točko 1). Otroci in hišni ljubljenci ne smejo biti v bližini mehanizma počivalnika, ker lahko pride do resnih poškodb. Počivalnik mora biti stabilen na ravni podlagi na tleh.

Počivalnik ne sme biti v bližini vira toplote.

V skladu s standardi je nazivna omrežna napetost 220 V.

Med nevihto in v času bližajoče se nevihte počivalnika ne uporabljajte.

Med uporabo počivalnika ne premikajte.

Pred uporabo priporočamo premik praznega počivalnika, da se nanj navadite. Otroci ne smejo uporabljati počivalnika.

Opora za noge ni sedež.

Pred premikom počivalnika izklopite električni kabel.

Če je na počivalniku odeja, jo odstranite, da se lahko sedež počivalnika vrne v prvotno stanje.

Uporabljajte le originalne rezervne dele in dodatke oz. dodatno opremo podjetja INNOV'SA. Le tako sta zagotovljena garancija in pravilno delovanje počivalnika.

Počivalnika ne smete na kakršenkoli način spreminjati in predelovati. V tem primeru garancija ni veljavna.

V primeru nepravilne ali neprimerne uporabe garancija prav tako ni veljavna.

Izdelek ne sme biti izpostavljen soncu, barva tkanine in ostalih materialov lahko zbledi.

Zadnjih koles ne odstranjujte.

Previdnostni ukrepi

Počivalnika ne smejo uporabljati neorientirani ljudje. Če počivalnika uporabnik ne more ali ne sme sam uporabljati, mora imeti pomoč in nadzor tretje osebe.

Največja dovoljena teža

Največja dovoljena teža uporabnika je 160 kg za model COCOON 1 ali 2 motorja, 130 kg za model COCOON XS in 220 kg za model COCOON XXL.

2 – Montaža

Odstranite originalno embalažo.

Naslon na hrbet namestite na podnožje pred namestitvijo naslonov za roke. Naslon nagnite nazaj s pomočjo daljinskega upravljalnika.

Dvignite podlogo zaradi lažjega dostopa do konzole.

Konzole namestite na naslon (slika 1A) obrnjene proti konzolam podnožja (slika 1B).


Možni sta dve globini sedeža: 45 cm ali 55 cm.

Konzola podnožja je lahko nekoliko (B) nagnjena, potegnite jo v položaj pred konzolo po vaši izbiri (45 ali 50 cm) katerekoli globine sedeža (A).

Podrsajte konzolo (B) na konzolo (A) dokler ne slišite zvoka 'klik'.

Šele nato lahko naslona za roke postavite na pravilno mesto.

Vstavite kovinsko palico naslona za roke v luknjo na plošči. Ponovite na drugi strani.

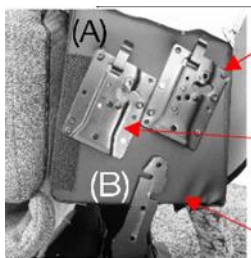


Konzola (globina sedeža – 45cm)

Konzola (globina sedeža – 55cm)

Konzola

Slika 1

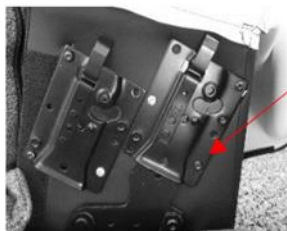

Fiksiran naslon za hrbet

Slika 2

Kabel električnega aktuatorja vklopite v pretvornik.

Električni kabel vklopite v pretvornik na drugem koncu. Preverite povezave.


Vklopite električni kabel z upoštevanjem standarda 220 V.

S pomočjo mehanizma na hrbtni strani počivalnika lahko naslon za hrbet nagnete, in sicer tako, da rahlo potegnete zapah na konzoli.

Garancija ne zajema neustreznega ravnanja ali montaže.

Namestitev držala za časopise:

- Odprite naslon za roke (slika 1).
- Držalo za časopise postavite na ploščo naslona za roke. (slika 2).

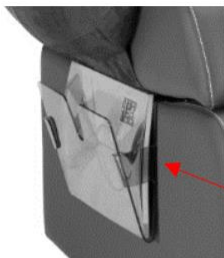

Slika 2

Držalo za časopise postavite na sredino plošče naslona za roke. Pri tem ne smete zapreti zareze na sprednjem delu.

Slika 1



Ogrodje za namestitev :

- Dvignite počivalnik v položaj na sliki 3.
- Kovinsko ogrodje namestite v podnožje v predvidene odprtine na sliki 4.
- Podnožje namestite v ogrodje.

Če želite zamenjati stran pladnja, potegnite črna vtiča, ki ovirata pot do odprtine in s tem postavitev podpore/ogrodja.



Slika 3

Odprtina za namestitev ogrodja



Slika 4

Uporaba daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik se namesti pod blazino naslona za roke.



Slika 5

Počivalnik COCOON z 1 motorjem, XS in XXL (slika 5)

Daljinski upravljalnik ima 2 gumba

Enostaven nagib počivalnika

Puščica navzgor: postavitv v sedeči položaj, opora za noge se spuščča, nato pa dviga

Puščica navzdol: nagib nazaj z dvigom opore za noge.

ZELO POMEMBNO!

Ob vklapljanju v elektriko ne uporabljajte daljinskega upravljalnika. Če pa pride do izpada električnega omrežja, daljinski upravljalnik zaklenite v varnostni način ('safety mode'). Ponovno ga aktivirajte z nagibom počivalnika: v celoti dvignite oporo za noge ter nagnite naslon za hrbet do konca, v trajanju 60 sekund.



slika 6

Počivalnik COCOON 2 motorja (slika 6)

Daljinski upravljalnik s 4 gumbi

Zeleni gumb: nagib naslona za hrbet.

Beli gumb: postavitv naslona za hrbet v osnovni položaj.

Modri gumb: dvig opore za noge. Postavitv v sedeči položaj.

Rumeni gumb: spuščanje opore za noge. Postavitv v dvignjeni položaj.


Preverite mehanizem pred vsako uporabo (gl. točko 1).

Bodite previdni ob uporabi počivalnika, če so v bližini otroci ali hišni ljubljenci. Lahko pride do resnih poškodb.

Sestavni deli počivalnika COCOON

Sestavni deli

- 1 – Zadnji del sedeža
- 2 – Pralna/odstranljiva prevleka
- 3 – Sedež
- 4 – Pralna/odstranljiva prevleka za sedež
- 5 – Opora za noge
- 6 – Naslona za roke, premična/odstranljiva
- 7 – Udobna blazina za sedež
- 8 – Plošči naslonov za roke
- 9 – daljinski upravljalnik z 2 gumboma izmenljiv levo/desno – *Stop Start* funkciji

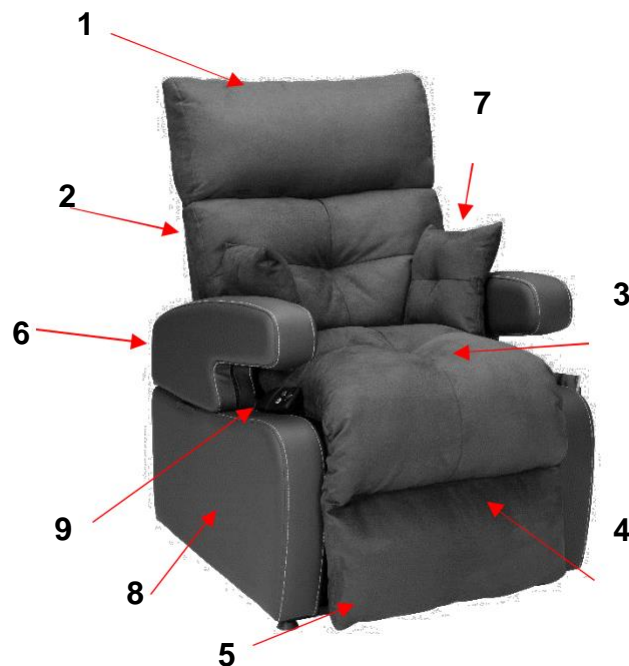


Dodatki:

Možni dodatki za počivalnike COCOON :


- pladenj za desno ali levo stran (slika 7)
- držalo za časopise levo ali desno (slika 8)
- dvigalka za počivalnik (slika 9)



slika 7

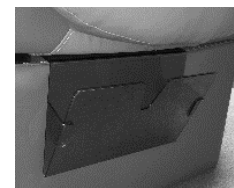


slika 8

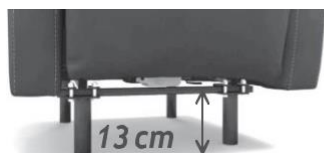

slika 9

- dvigalka za počivalnik (slika 10) s prirobnico in palica za transport

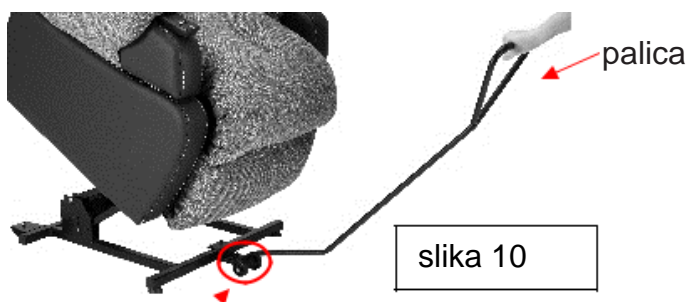

slika 10

prirobnica

ODSTRANJEVANJE PRALNIH PREVLEK

Prevleka za sedež

- Odstranite ježek trak s hrbtne strani počivalnika.
- Odstranite zadrgo z obeh strani sedeža.

Prevleka za sedež/oporo za noge

Odstranite ježek trak z dna, z leve in desne strani sedeža.

Prevleka je pralna pri 30°C

Svetujemo pranje prevleke v tanki mreži ali prevleki za blazino.

Zamenjava naslona za hrbet:

Naslon za hrbet je možno zamenjati z namenom pridobivanja večje ali manjše globine sedeža.

- Naslon je možno sneti in ponovno namestiti s pomočjo kovinskih drogob ob straneh.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Največja dovoljena teža uporabnika	160 kg (1 ali 2 motorja) / 130 kg (XS model) / 220 kg (XXL model).
Premaz	V skladu s standardi za ugotavljanje vžigljivosti pohištva 1021-1, 1021-2: PVC/PU: čokolada, sivo-rjava, sladki koren, pistacija, malina Poročilo testov n°367160734 in n° 367160735 Poliester (žamet): rjava in naravna Poročilo testov n°18.0433.01 in n°18.02686.01 Pisana tkanina: rjava in siva; 18.03363.01
Prevleka	silikonska votla vlakna

ČIŠČENJE MATERIALOV PREVLEK

- Dovoljeni so le detergenti, topila in odstranjevalci madežev, ki jih je predpisal FCBA Tehnološki Inštitut.
- Madeže, ki jih pusti kemični svinčnik, je potrebno nemudoma odstraniti.

GARANCIJSKI LIST

Priimek:

Ime:

Naslov:

Poštna številka:

Mesto:

Datum nakupa:

Model:

Serijska številka:

Za uveljavljanje garancije je potreben datum nakupa .

Hvala, ker varujete okolje. Izdelek in originalna embalaža se reciklirata. Po koncu življenjske dobe izdelka, ga je potrebno odpeljati v objekt za ustrezno recikliranje. Pravilno odlaganje odpadkov varuje okolje.

Z namenom vzdrževanje in izboljševanja kakovosti naših storitev vas prosimo, da nam posredujete morebitne opombe in opazke v zvezi s kvaliteto izdelka in njegovo funkcionalnostjo.

OPOMBE

Garancija

Mehanizem in aktuator: 5 let

Počivalnik: 2 leti

Standardi

Počivalniki podjetja INNOV'SA so v celoti izdelani v skladu s predpisi in standardi:

- z 2014/35/EU Direktivo za nizkonapetostne naprave (LVD);
- z Direktivo 2014/30/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic EU v zvezi z elektromagnetno združljivostjo;

- z RoHS Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Počivalniki podjetja INNOV'SA so skladni s standardi:

- EN 60335-1/A11:2014
- EN 55014-1/A2 :2011
- EN 55014-2/A2 :2008
- EN 61000-3-2 :2014
- EN 61000-3-3 :2013
- EN 62233:2008
- EN 50581 :2012

Oglejte si predstavitev počivalnika COCOON na naši spletni strani www.innov-sa.fr





INNOV'SA

7 avenue Bernard Pleds 10110 BAR-SUR-SEINE-FRANCIJA

Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12

Splet: www.innov-sa.com – E-pošta:

innovsa@innovsa.com

Datum veljavnosti sept. 2021 – verzija 3



POZOR

Ne dovolite otrokom v bližino vašega počivalnka.
Počivalnik vedno zložite po uporabi.
Naslon za hrbet in oporo za noge dvignite oz. spustite v prvoten položaj.
Pri tem rok in prstov ne približujte mehanizmu.
Počivalnik lahko upravlja le končni uporabnik.
Počivalnik postavite **vsaj 80cm** stran od stene.

Opozorilo hranite.